



Executive alumínium vázas kerekesszék

0810803

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: KEREKESSZÉK 24" HÁTSÓ KEREKEKKEL



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérültek vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és a beteg maga (ha van 20-24"-es hátsó kerekei) vagy kísérő segítségével mozgásra használható.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó keréssel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat

Ha a kerekesszék 13-40 cm átmérőjű hátsó keréssel rendelkezik, és nincs kézi perem a keréken, akkor a felhasználónak egy kísérőre van szüksége, aki a kerekesszéket a kerekesszék hátulján

található fogantyúkon keresztül mozgatja.

MŰSZAKI ADATOK

Lásd az A. MELLÉKLETET

MÉRETEK

Lásd a B. MELLÉKLETET

ÖSSZESZERELÉS

Lásd a C. MELLÉKLETET

SZIMBÓLUMOK

Lásd a D. MELLÉKLETET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékebe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha térdjei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIAK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

december 21. [7]

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.

4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumibroncsokat, a gumibroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumibroncs és a kerékszárak között.

FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ez a kerekesszék kizárólag személy szállítására használható az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszék élettartamát és hatékonyságát.

HETI

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasításokat követve.
 2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van.
 3. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
 4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.
 5. Ellenőrizze a kerékcavarokat, és szükség esetén állítsa be.
 6. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.
- december 21. [8]

NEGYEDÉVENKÉNT

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsavarok.
2. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
3. Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrülékes kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőt.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIÁK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIÁK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott

szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

KERET: ALUMÍNIUM, ÖSSZECSUKHATÓ HÁTTÁMLÁVAL

SZÍN: EZÜST

ÜLÉS: SZÜRKE-FEKETE SZÖVET PÁRNA

KARFÁK: ÖSSZEHAJTHATÓ

LÁBTÁMASZOK: LEVÁLASZTHATÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ HOSSZ

HÁTSÓ KEREKEK 24" SZILÁRD gyorskioldó

ELÜLSŐ KEREKEK: SZILÁRD 8"x1" (200x25 mm)

DÖLÉS GÁTLÓ NAI / IGEN, SZABVÁNY

KÍMÉRŐ FÉK: NINCS

MAX. TEHERBÍRÁS: 110 kg

EXTRA: DUPLA KERESZT RÚD

EMELHETŐ LÁBTÁMASZ : NINCS

LEVEHETŐ FEJTÁMASZTÁS: OPCIONÁLIS KÓD: 0811370

I.V STAND: OPCIONÁLIS KÓD: 0810794, 0808297

OXIGÉN HENGER TARTÓ: N/A

POHÁRTARTÓ: N/A

NÁD-MANKÓTARTÓ: OPCIONÁLIS KÓD: 0811369

HÁTSÓ KERÉKREFLEKTOR : OPCIONÁLIS KÓD: 0811356

B. MELLÉKLET MÉRETEK



0808383	46 cm	50 cm	40 cm	45 cm	65 cm	104 cm	86 cm	49 cm	24" 8"	100 Kg	17 Kg
0808483	41 cm	44 cm	40 cm	45 cm	60 cm	104 cm	85 cm	49 cm	24" 8"	100 Kg	17 Kg
0808480	46 cm	45 cm	41 cm	41 cm	67 cm	110 cm	90 cm	49 cm	24" 8"	100 Kg	20 Kg
0808481	46 cm	45 cm	41 cm	41 cm	67 cm	110 cm	90 cm	49 cm	24" 8"	100 Kg	20 Kg
0809236	46 cm	46 cm	40 cm	78 cm	66 cm	118 cm	121 cm	51 cm	24" 8"	100 Kg	26 Kg
0806062	46 cm	44 cm	45 cm	78 cm	68 cm	120 cm	124 cm	54,5 cm	24" 8"	100 Kg	29 Kg
0223004	45 cm	44 cm	44 cm	37 cm	65 cm	106 cm	90 cm	54 cm	24" 8"	100 Kg	21 Kg
0808367	50 cm	50 cm	45 cm	37 cm	68 cm	110 cm	89 cm	54 cm	24" 8"	120 Kg	25 Kg
0810802	46 cm	45 cm	40 cm	42 cm	62 cm	104 cm	92 cm	52 cm	24"QR 8"	110 Kg	13 Kg
0810803	46 cm	45 cm	45 cm	40 cm	67 cm	106 cm	87 cm	52 cm	24"QR 8"	110 Kg	16 Kg
0810807	44 cm	41 cm	45 cm	40 cm	63 cm	106 cm	87 cm	52 cm	24"QR 8"	110 Kg	16 Kg


A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Nyitás: Fogja meg a fogantyúkat és húzza kifelé, majd nyomja le az ülés oldalán lévő rudakat, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik.




Bezárás: Kövesse a fordított eljárást.

Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattan. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik lábtámasznál. Távolítsa el a lábtámaszt a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklócsapszegekről.

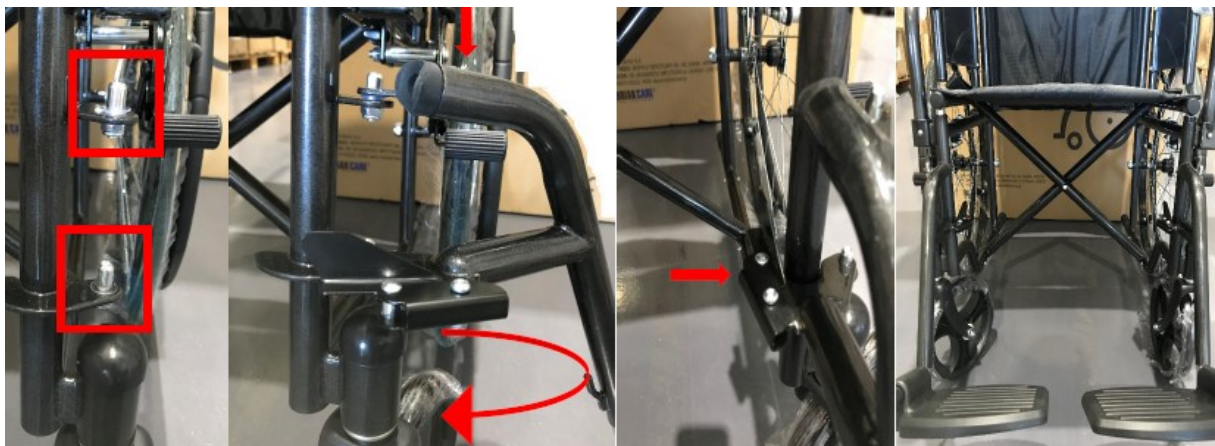

A lábtámasz hosszának beállításához használja a termékcsomaghoz mellékelt szerszámot. Lazítsa meg a csavart, és rögzítse a kívánt hosszúságra.

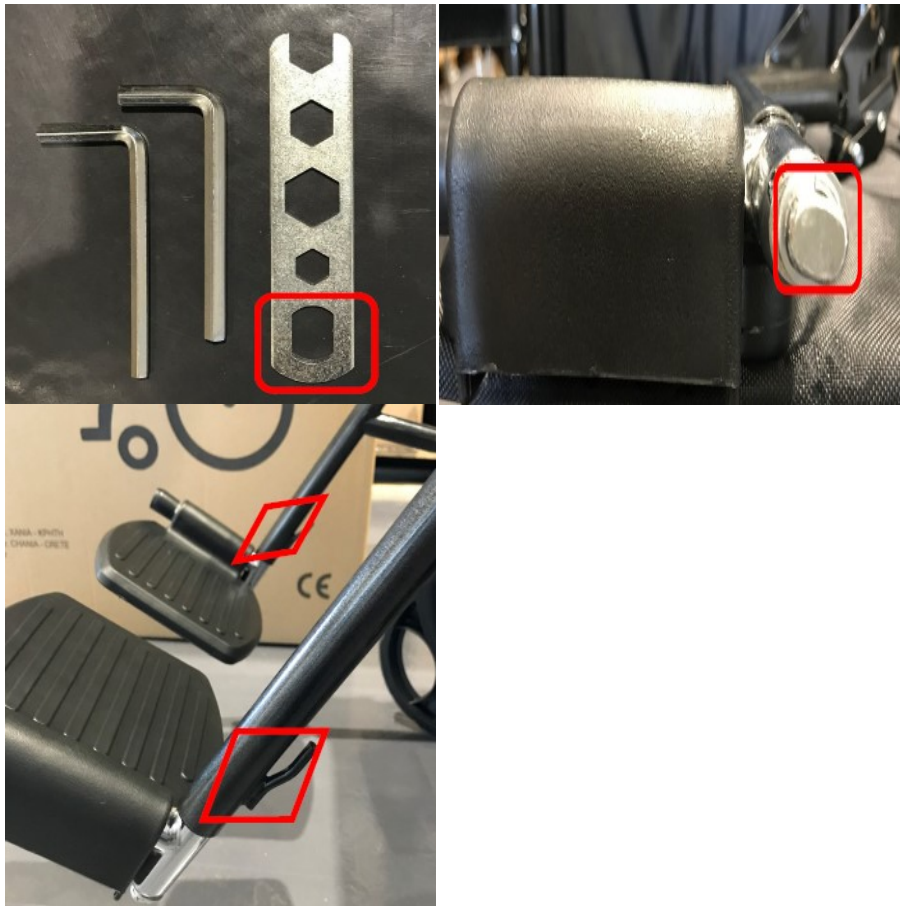

Használja a mellékelt lábtámasz övet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beteg lába megfelelően helyezkedik el.




Ha a lábtámasznak van emelő funkciója, ne használja az övet. A lábtámasz felfelé vagy lefelé mozgatásához nyomja előre a kart, és emelje fel vagy engedje le, az alsó résztől tartva. Ezt a funkciót biztonsági okokból csak a kezelőtől ajánlott elvégezni, és nem maga a felhasználó.



A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak, ha az álló helyzetben van, hogy megakadályozza az elgurulást.

A fék bekapcsolásához nyomja előre a fékkart a tenyérrel. (1)

A fék kioldásához húzza hátra a fékkart az alsó ujjakkal (2)

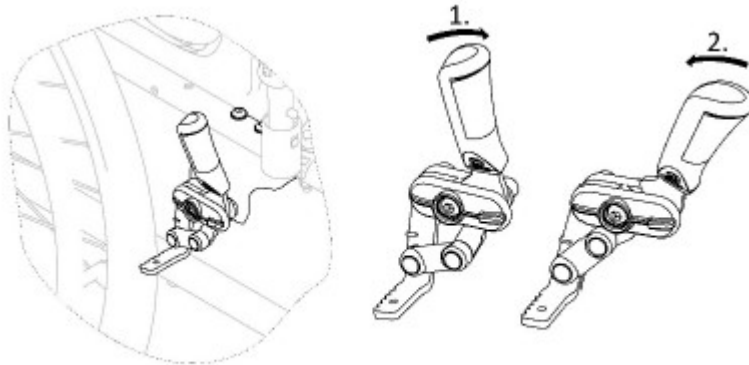

Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.

Ne húzza be a rögzítőféket, hogy lelassítsa a kerekesszéket.

Ne támaszkodjon a rögzítőfékekre támaszkodás vagy áthelyezés céljából.

Fék használata közben tartsa távol ujjait a mozgó alkatrészekről, kezét mindig a fékkaron tartsa.


A kerekesszék biztonsági övvel is felszerelhető. Megakadályozza, hogy a felhasználó lecsússzon a kerekesszékben vagy kiessen a kerekesszékéből.

A laza öv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lecsússzon, és fulladásveszélyt jelenthet

Győződjön meg arról, hogy teljesen hátra ül az ülésben, és hogy a medence a lehető legegységesebb és szimmetrikusabb legyen.

A záráshoz nyomja be az A reteszt a B csat kapcsába.


TA kinyitáshoz nyomja meg a C gombot, és húzza ki az A reteszt a B csatkapocsból.

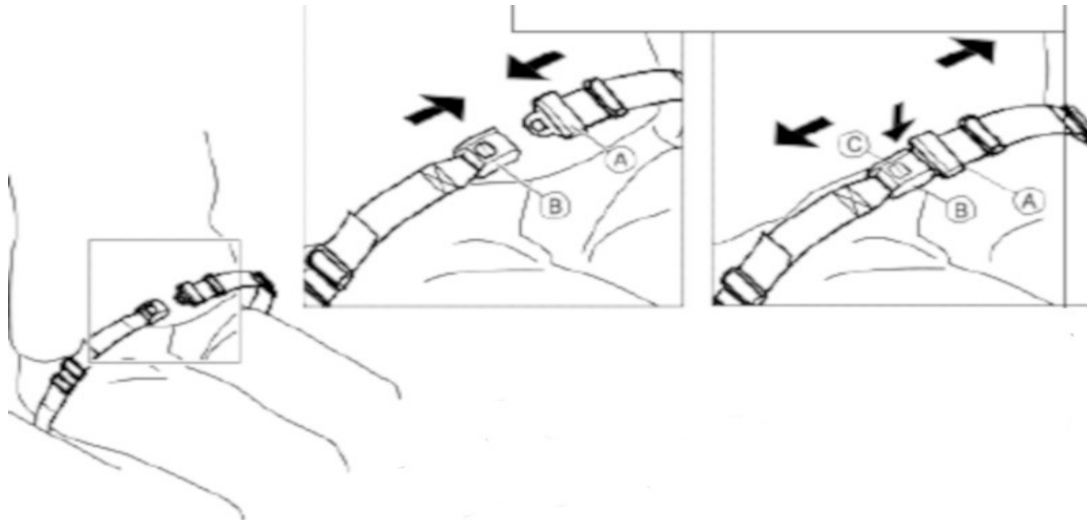

Helyezze be a dőlésgátló kerekeket a fenti táblázat szerint.

Rögzítse a billenésgátlót a kerekesszék vázához rögzítőcsapokkal. (vagy „C” klipek).

Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsapok (vagy „C” kapcsok) kinyúlnak mind a billenésgátlón, mind a kerekesszék keretén.

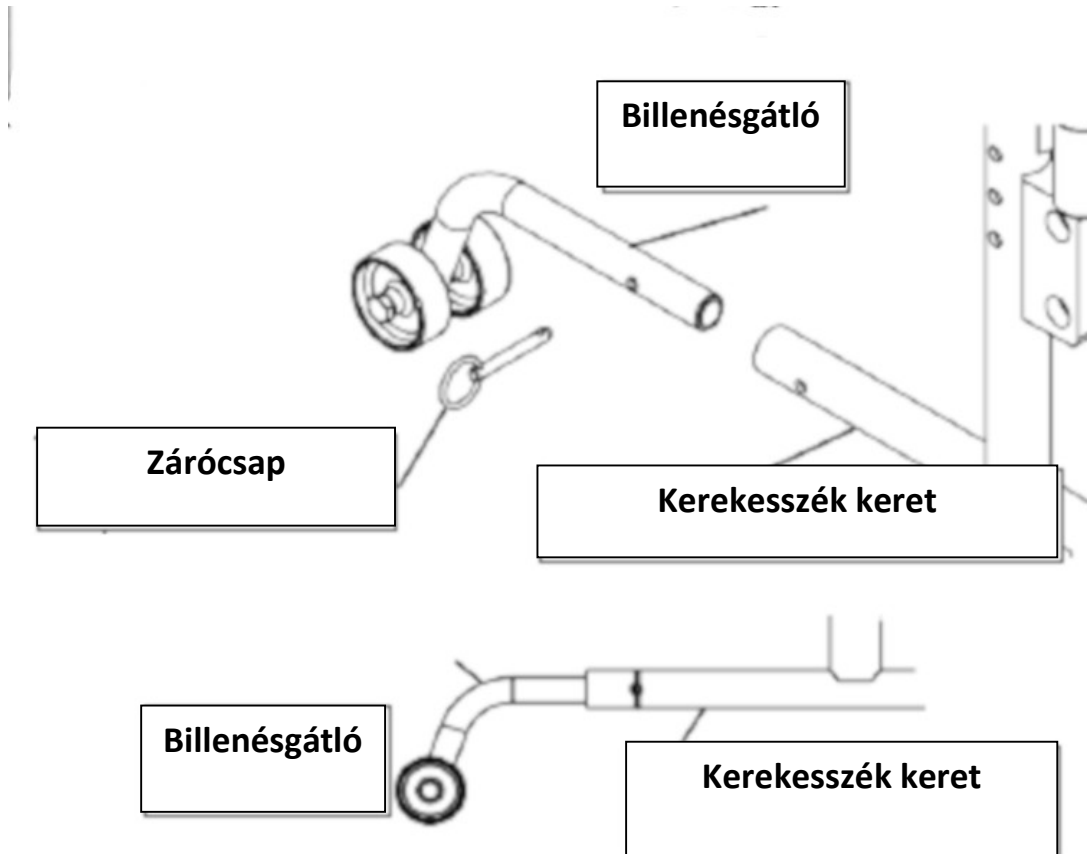



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi
eszközazonosító



Napfénytől távol
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri
használat



Berendezési irányelv