

Önhajtós kerekesszék Gemini 24 nagy kerékkel

0811300

Használati útmutató



0811300,0811301,0811306



0811300B,0811301B

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték.

Lehetővé teszi mozgássérült vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és mozgásra a beteg maga (ha van 20-24"-es hátsó kereke) vagy kísérő segítségével is használható.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó kerékkel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat

MŰSZAKI ADATOK:










| | |
|---------------------------------------|---|
| VÁZ | Alumínium- Összecsukható |
| SZÍN | Ezüst |
| ÜLÉS-HÁTÁMLA | Szövet belső huzattal |
| KARTÁMASZ | Összecsukható |
| LÁBTÁMASZ | Összecsukható, állított hossz, elforgatható |
| HÁTSÓ KEREKEK 0811300B,0811301B | 24" kompakt sugárzással |
| HÁTSÓ KEREKEK 0811300,0811301,0811306 | 24" kompakt sugárzással és gyorskioldással |
| ELSŐ KEREKEK | 8" x 2" kompakt (200x50 mm) |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 0811300,0811301 | Dupla keresztléc |
| 0811300B,0811301B,0811306 | Egyetlen keresztléc |

Tartozékok (opcionális):

1. Billenésátló kerekek ref.: 0811357
2. Dönthető lábtámasz ref.: 0811358 jobb és 0811359 bal
3. Hátsó kerék (24") Fényvisszaverő ref.: 0811356
4. Hátsó kerék (24") felfújható gumikkal, gyorskioldó ref.: 0811363

MÉRETEK:

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 0811300 0811300B | 47cm | 46cm | 40cm | 42cm | 64cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 130kg | 18,5kg |
| 0811301 0811301B | 44cm | 43cm | 40cm | 42cm | 61cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 130kg | 18,3kg |
| 0811306 | 43cm | 41cm | 40cm | 42cm | 60cm | 104cm | 91cm | 50cm | 24"8" | 110kg | 18,1kg |

ÖSSZESZERELÉS Lásd az A. MELLÉKLETET

SZIMBÓLUMOK Lásd a B. MELLÉKLETET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékekbe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.

- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIÁK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumibroncsokat, a gumibroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumibroncs és a kerékszárak között.

FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha még nem jártas, kérjen segítséget egy kísérőtől!

FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az ülésbe az áthelyezéssel

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ez a kerekesszék kizárólag személy szállítására használható az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

HETI

- Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasítások szerint.
- Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van-e.
- Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
- Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy speciális króm vagy festett felületekhez való szerekkel.
- Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
- Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

NEGYEDÉVENKÉNT

- Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsavarok.
- Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
- Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
- A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

ÉVENTE

Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.

2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó.

Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartáson és ellenőrzésen kívül a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződésekelt szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- **NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.**
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrülékes kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszeret.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
 - Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIAK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért

- A MOBIÁK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha egy nap úgy találja, hogy terméke cserére szorul, vagy ha a továbbiakban már nem használ, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét és a termék összetevőinek újrahasznosítását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

- Először is ellenőrizzük a csomag tartalmát. Helyezze el a kerekesszéket a képen látható módon.



- Az ülés oldalán lévő rudakat egy ozdulattal megnyomva a kerekesszék kinyílik és teljesen nyitott állapotba kerül.



- Fogja meg a lábtámaszt a kezével, és helyezze el az ábrán látható módon. A csapnak át kell mennie a lyukon




- Lábtámasz elhelyezése után.



- A mellékelt öv segítségével győződjön meg arról, hogy a beteg lába megfelelően van elhelyezve.

Dönthető lábtámasz felszerelése (Opcionális)

- Távolítsa el a lábrögzítő övet.
- Távolítsa el a lábtámaszt.
- Helyezze be a dönthető lábtartót a megfelelő támasztékokra.
- Helyezze a fekvőtámaszt a megfelelő helyzetbe, és rögzítse.
- Állítsa be a dönthető lábtámaszt a kívánt helyzetbe.

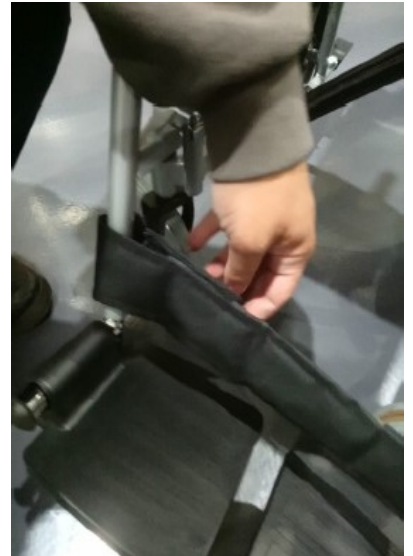

Billenés gátló rendszer (kérésre)

Abban az esetben, ha a kerekesszékekben van felborító rendszer, távolítsa el a kupakot a kerekesszék alján lévő csövekről.



Helyezze be a billenés gátló kerekeket.



Szerelje be a rögzítőcsapot a metsző furatokba.
A folyamat megfordításával eltávolíthatjuk a borulást elkerülő rendszert.



B. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi
eszközzazonosító



Napfénytől távol
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri
használat



Berendezési irányelv



MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ, ΑΚΡΟΤΙΡΗΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiacare.com